

*Alcohol, los solventes,
u otros productos
químicos dañarán la
prótesis*

El uso de un limpiador enzimático duro de la lente de contacto puede también ser útil en disolver los depósitos (proteína) acumulados de la superficie. Siga las instrucciones en el producto.

La prótesis debe recibir una limpieza profesional y pulido cada seis meses. Los rasguños y los depósitos acumulan con el tiempo y pueden ser alisado o eliminado excepto por su ocularist.

Usted debe ver a su doctor si excesivo descargue y la irritación persiste para más que algunos días después de pulir.

*Situaciones especiales, por ejemplo usando un prótesis scleral de la cáscara sobre un ojo sensible o cuando hay encierro incompleto de los párpados, puede causar la paciente que tire la prótesis con más frecuencia, quizás uniforme dejándolo hacia fuera en la noche. Su doctor u ocularist le aconsejará de esto.

**El material de acrílico absorbe el líquido. La inmersión en un desinfectante por un período del tiempo largo lo hará ser absorbido causando irritación.

RESUMEN

- Cuidado adecuada de su prótesis aumentará la comodidad, apariencia, y longevidad de su ojo prótesis.
- Limpie la prótesis cuando se necesita sin quitar del órbita, mientras quitando solo de vez en cuando para limpieza y desinfección.
- Para quitar la prótesis, en primer lugar sácalo de la tapa inferior, y después tire hacia abajo de la tapa superior. Nunca saca la prótesis directamente.
- Primero, inserte la prótesis a través de la parte superior, y después tire hace abajo la tapa inferior mientras empujando hace arriba la prótesis.
- Almacene la prótesis en salina estéril o solución de sal equilibrada si es quitado para un período de tiempo.
- La prótesis debe recibir una limpieza profesional y pulido cada seis meses.

Cuidar Del Prótesis Ocular



Prosthetic Artists, Inc.

Eric M. Lindsey, B.C.O
1736 Professional Dr.
Sacramento, CA 95825
(916) 485-4249

RUTINA DE CUIDADO DIARIO

El cuidado de su ojo artificial aumentará su bienestar y apariencia. Cuidado adecuado también aumentará la vida y duración del ojo prótesis.

Lágrimas y mucosa dejan depósitos sobre el ojo, y se desarrolla una capa que entorpece su brillo. Además, estos depositos pueden fastidiar su órbita (cavidad del ojo).

La mayoría de las acumulaciones diárias pueden ser limpiadas sin remover la prótesis de la órbita (cavidad). Se puede hacer la limpieza mientras se ducha usando Johnson's Baby Shampoo (champú de los niños). Hay enzimas del champú que quiebran las proteínas que se acumulan en la prótesis y tiran mucosa de sus párpados y sus pestañas.

Usted puede limpiar la prótesis fuera de la ducha sin tirarla con una solución salina estéril. Pase una gasa húmeda de algodón moviéndose siempre en la dirección hacia la nariz. Pasando en la dirección contraria de la nariz puede displazar o hacer girar el ojo.


Limpie la prótesis y tapas cuando necesita, pero quítalos solo a veces a menos que hay problemas especiales.* El retiro expone su órbita a bacterias. Sin embargo, si está enfermo, tiene excreciones exceso, o está expuesto a áreas sucias, puede ser que desee quitar y limpiar su prótesis más frecuentemente.

Cuando la prótesis es quitado para limpieza, puede tomar hasta tres días para los lubricantes naturales del cuerpo para recubrir la superficie del prótesis con secreciones calmantes. Durante este tiempo, puede usar lágrimas artificiales, como OASIS o Refresh, o lubricantes aceitosos, como Ocu-Sil, Sil-Ophtho, o Strauss Artificial Eye Lubricant, para reducir la irritación causada por el clima severo, duras condiciones de trabajo, o bajo flujo lagrimal (ojos secos).

QUITANDO EL OJO PARA LIMPIEZA


Lávese bien las manos completamente antes de tirar o insertar su prótesis

Para quitar el ojo sin una taza de succión, incline la cabeza hacia abajo y mire hacia arriba. Después, empuje adentro (hacia la espalda) y arriba con su dedo índice la piel por debajo de la tapa inferior. Esto permite que el ojo caiga hacia abajo (1).

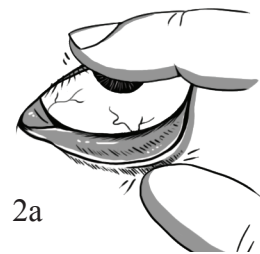


2a

El quito con la ayuda de una copita de succión empieza con el mojo de la copita con agua. Inclínese la cabeza para abajo y abra los párpados con sus dedos (2a). Apriete la copita de succión y aplíquela al centro de la prótesis. Tírela para arriba y afuera del párpado inferior (2b), y después tírela para abajo del párpado superior (2c). Nunca intente tirar la prótesis directamente afuera de la órbita.

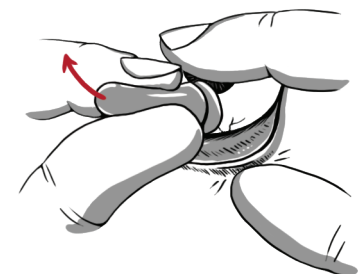

2b

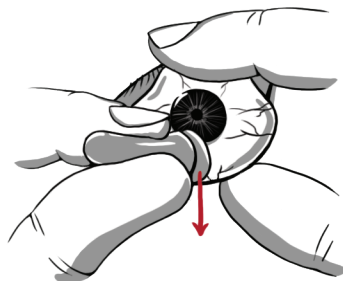

2c


2

Lave la prótesis en agua templada cada vez que se la quita. Asegúrela entre sus dedos, restriegando apaciblemente con una solución diluida de Johnson's Baby Shampoo. La prótesis puede ser pulido entre los dedos con una toalla de papel mojada.

INSERTANDO EL OJO


Siempre moje bien la prótesis antes de introducirla a la órbita. (cavidad)

Levántese su párpado superior. Cuando tenga la prótesis en medio de los dedos (o en una copita de succión), introduzca la parte de arriba (la prótesis Danz casi siempre tiene una marca o letras encima del iris) de las prótesis (3a). Suelte el párpado.

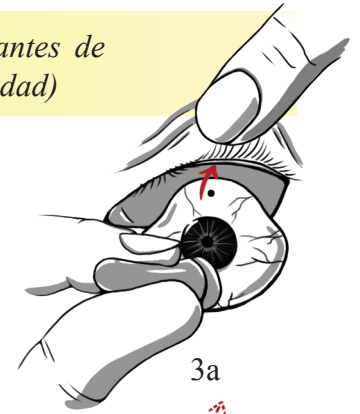

3a

Ahora, tire hacia abajo el párpado inferior mientras presionando la prótesis para arriba (3b). Finalmente, presione la prótesis hacia la órbita para quitar cualquier aire que podría estar atrapado detrás.

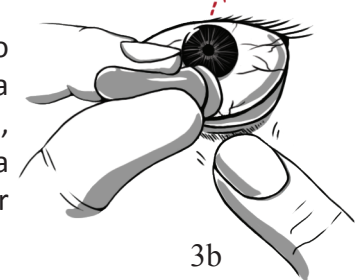

3b

LIMPIANDO LA PRÓTESIS

Es posible que algunos pacientes pasarán la contracción de la órbita si la prótesis se está ido hacia fuera por mucho tiempo, incluso por la noche. Cuando la prótesis se deja de zócalo por un período del tiempo, debe ser almacenado en una solución de sal salina o equilibrada y estéril.

De vez en cuando, usted puede desear desinfectar y limpiar la superficie de la prótesis. Puede ser colocado en un peróxido de hidrógeno del 3% o una solución acuosa del yodo el 10% de providone (Betadine). La prótesis se debe sumergir en la solución por *no más de largo de 10 minutos*** y después aclarar a fondo antes de la reinsertación.

3